

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.



ESTUFA DE CULTIVO PARA LABORATORIO INCLUYE REJILLA REF E20164

[Click para ver ficha técnica](#)

Marca: MEMMERT - ALEMAN
Ref: UN55 Single display con rejilla Ref. E20164
Referencia:IMC4-07

Uso: laboratorio clínico de rutina, microbiología, campos de investigación, medicina, farmacia, tecnología de alimentos.

Secado, calentamiento, regulación de temperatura, envejecimiento, secado al horno, ensayo y endurecimiento de precisión en el ámbito de la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.

Características:

- Cámara de trabajo acero inoxidable con estriado periférico de aletas embutidas y superficie amplia para integrar la calefacción de gran superficie con revestimiento de cerámica y metal.
- Rejillas de acero inoxidable.

- Carcasa: acero inoxidable estructural.
- Pared trasera con chapa de acero galvanizado single display de manejo intuitivo (pantalla de gráficos a color) con pantalla táctil.
- Puerta exterior de acero inoxidable completamente aislada aire exterior a través de trampilla de extracción de aire de ajuste electrónico.
- Cable de poder con clavija americana.

Especificaciones técnicas:


- Convección natural de aire.
- Single display.
- Temporizador digital: ajustable entre 1 minuto, 99 días, 23 horas.
- Controlador PID.
- Microprocesador pantalla TFT de alta definición.
- Parámetros ajustables en control COCKPIT.
- Temperatura Celsius o Fahrenheit.
- Hora del programa, horarios, usos, idioma, alemán, inglés, español, horario de verano-invierno.
- Interface Ethernet en la parte posterior del equipo.
- Un (1) sensor PT 100 DIN clase a de cuatro (4) hilos protección de sobre temperatura, control de temperatura ajustable libremente, limitador de temperatura mecánico.
- Resolución de visualización de los valores de consigna 0,1 °C a 99,9 °C, 0,5 °C entre 100 °C y en los valores reales 0,1 °C (led).
- Función setpoint wait: no se pone en funcionamiento hasta que alcance la temperatura.
- Cámara de trabajo de acero inoxidable.
- Volumen: 53 lt. Ancho: 400 mm. Altura: 400 mm.
- Fondo (sin los 39 mm. Del ventilador) 330 mm.
- Rejillas de acero inoxidable incluidas una (1) número máximo de rejillas cuatro (4) (opcionales).
- Carga máxima: 80 kg.
- Carcasa de acero estructural ancho: 585 mm. Altura: 787 mm.
- No ruedas fondo (con manilla de la puerta), manilla de +56 mm. : 514 mm.
- Rango de temperatura de trabajo de + 20°C hasta +300°C precisión de ajuste 0.1°C.

Accesorios:

- Certificado de calibración de fábrica para +160°C.
- Rejilla Ref. E20164.
- Manual usuario.

Notas técnicas:

-Para corriente eléctrica 115V (+/-10%), 50/60 Hz V.

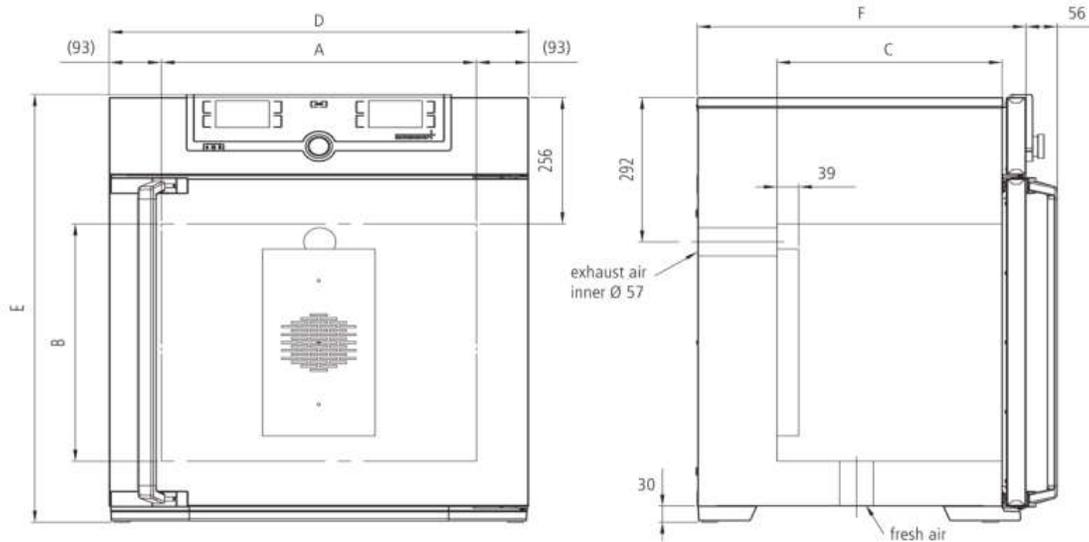

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación.

Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!